



Puoi trovare la
 soluzione esatta con
IDENTIKIT

Nel corso degli ultimi 40 anni sono nate numerose sistematiche implantari, tutte con disegni e caratteristiche differenti.

L'odontoiatria si trova di fronte ad una serie di pazienti con impianti di provenienza di difficile identificazione.

La prima domanda che sorge è :

«riusciremo a individuare la marca di questo impianto?»


«Riusciremo a reperire gli elementi protesici?»



Con noi la risposta è **“SI”**

Nella maggior parte dei casi non solo riusciamo a risalire alla linea implantare, ma formiamo tutti i componenti qualora non siano più reperibili sul mercato.

Con il nostro IDENTIKIT il medico può, seduta stante, tramite gli strumenti di cui è composto, provare e verificare con precisione la misura della forma geometrica, il diametro ed il passo della filettatura interna.

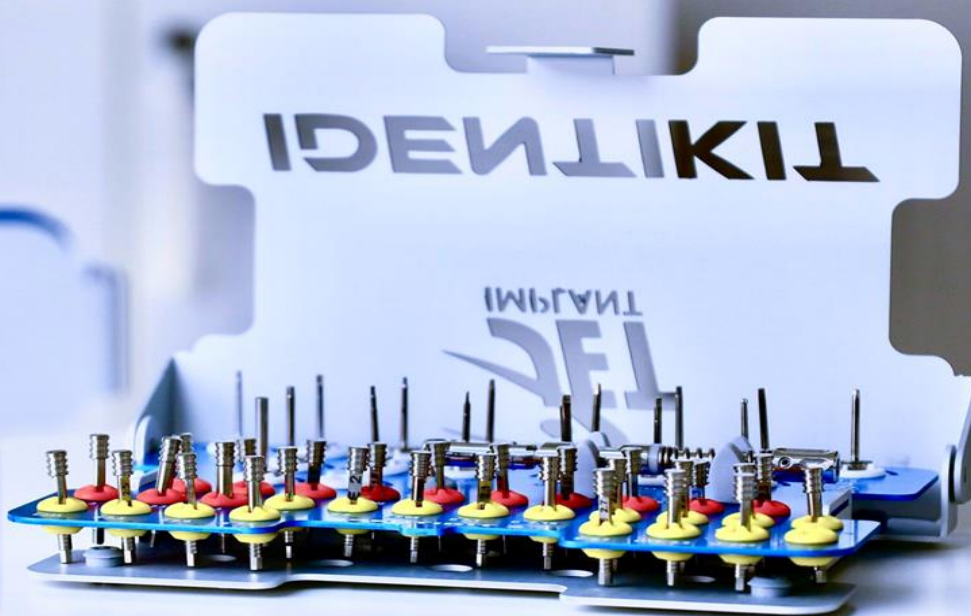

**UN PRODOTTO UNICO PER TUTTI GLI STUDI DENTISTICI
- RICHIEDI MAGGIORI INFO -**

Perché scegliere **IDENTIKIT** ?

- 1) La tecnica implantoprotesica è ormai, da tempo, impiegata con successo sia per piccole che per grandi riabilitazioni dentali.
- 2) Sempre più frequentemente, il medico dentista, si trova a ritrattare lavori impianto protesici che nel tempo hanno subito insuccessi, tra cui fratture delle sovrastrutture, difetti estetici e usura delle stesse protesi dentali.
- 3) Sempre più frequentemente, il medico dentista, si trova a ritrattare lavori impianto protesici di pazienti, provenienti da altri studi dentistici, **SPROVVISTI DI PASSAPORTO IMPLANTARE**.
- 4) Altra grande difficoltà o impossibilità è quella, dopo diversi anni, di reperire le loro componentistiche protesiche.
- 5) Il medico dentista in questi casi necessita, quindi, di una strumentazione appositamente costruita per poter identificare con estrema precisione l'impianto, allo scopo di procurarsi le componenti protesiche necessarie al nuovo progetto di restauro dentale.
- 6) Con l'ausilio di **IDENTIKIT**, il medico dentista potrà così riconoscere, **IN SOLI 5 MINUTI**, la connessione dell'impianto, il passo del filetto interno dello stesso e la misura precisa della vite passante o del componente protesico avvitato.
- 7) Grazie a **IDENTIKIT**, il paziente, **in una sola seduta** e, in alcuni casi si presentasse senza appuntamento, può tranquillamente attendere il proprio turno ed usufruire di **UN SERVIZIO UNICO ED ESCLUSIVO** dello studio dentistico.
- 8) La nostra Azienda usufruisce di una vasta gamma di componenti protesici già a disposizione per risolvere qualsiasi problematica e, in caso contrario, produce qualsiasi tipologia di componente protesico su misura.
- 9) **IDENTIKIT** è un prodotto **UNICO** e **BREVETTATO**.
- 10) Ad oggi abbiamo risolto tutte le richieste e le problematiche di tutti i medici dentisti che si sono affidati a noi.
- 11) **Possibilità di promuovere IDENTIKIT tramite il vostro sito web e pagine social.**

UN PRODOTTO UNICO PER TUTTI GLI STUDI DENTISTICI
- RICHIEDI MAGGIORI INFO -


scegli il prodotto in base alle tue esigenze

AVETE A DISPOSIZIONE IL
COMPONENTE
PROTESICO?

SCEGLI IDENTICARD

IDEALE ANCHE PER
L'ODONTOTECNICO


(maggiori info 392.62.38.637)

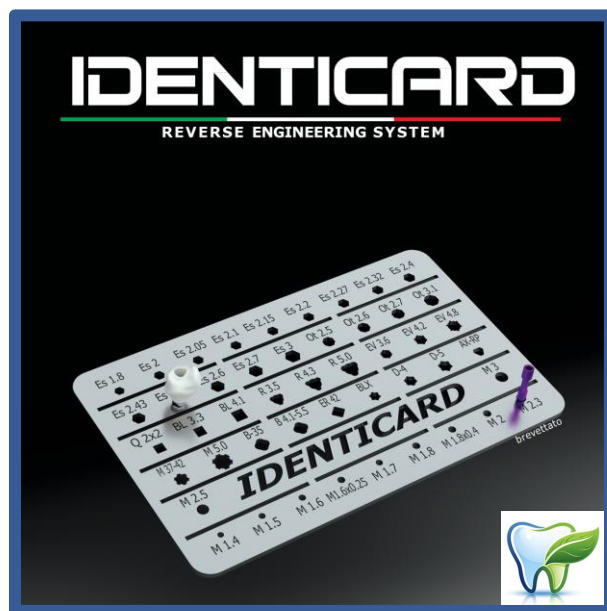

NON
AVETE A DISPOSIZIONE IL
COMPONENTE
PROTESICO?

SCEGLI IDENTIKIT

(maggiori info 392.62.38.637)

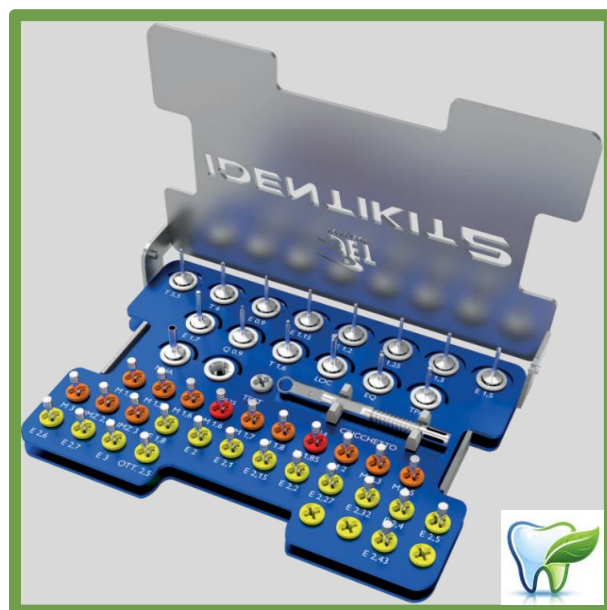

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE RIDOTTA

UN PRODOTTO UNICO PER TUTTI GLI STUDI DENTISTICI
- RICHIEDI MAGGIORI INFO -




Bio Clinic
FORNITURE DENTALI

Info e Ordini 392.6238637



L'operatore dentale pertanto può identificare solo parzialmente, attraverso una radiografia, la morfologia implantare.

Per questo Jetimplant Srl ha brevettato un "identikit", un set completo di strumenti sia filettati che esagonali, che potranno così aiutare a conoscere i parametri necessari.

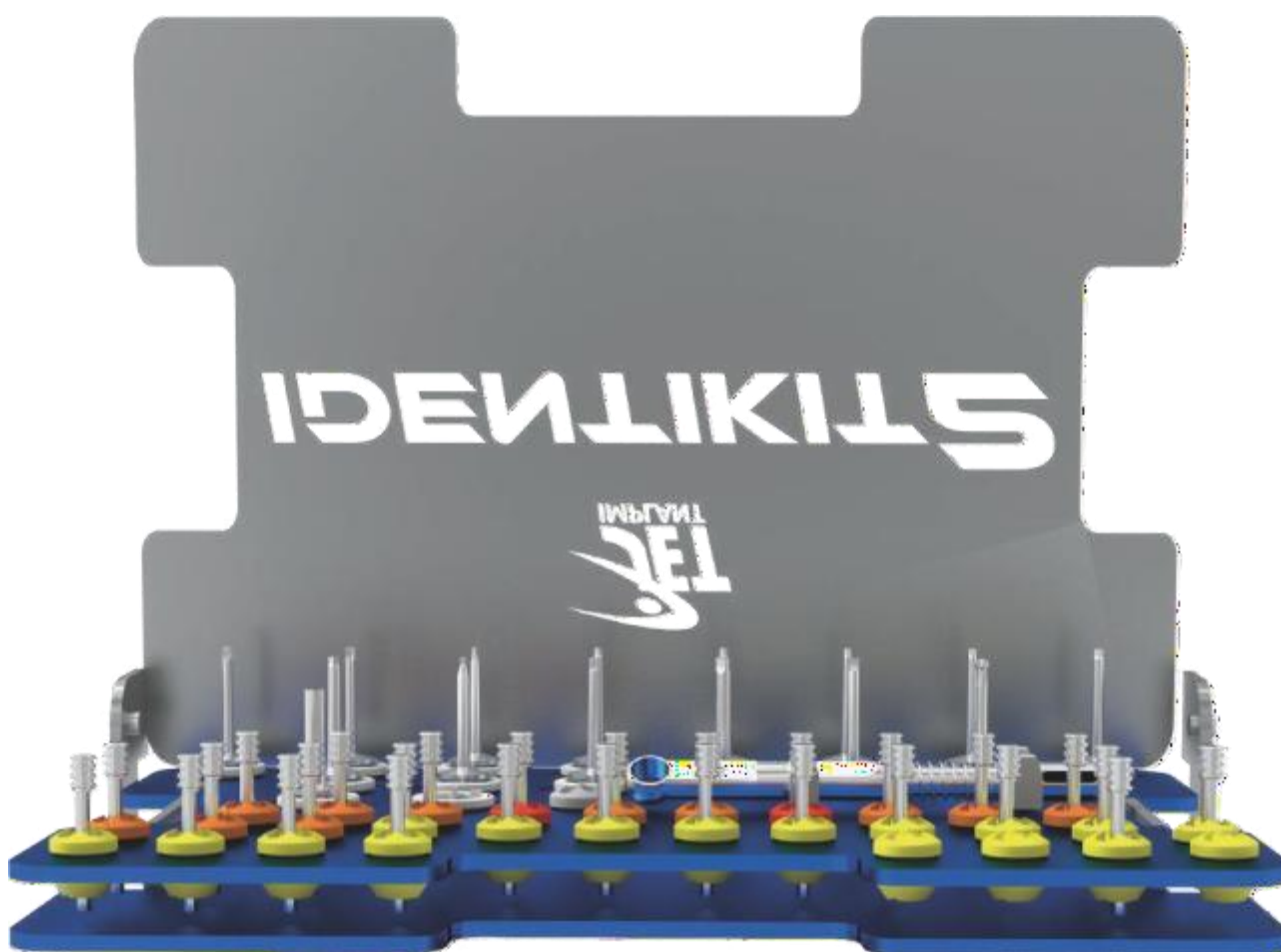

Tuttavia la difficoltà più grande che si riscontra è proprio quella di individuarli morfologicamente e strutturalmente: parliamo infatti di due condizioni essenziali per poter permettere il corretto recepimento delle strutture sovraimplantari, abutments, monconi componentistiche protesiche.

L'incapacità identificativa è dovuta alla mancanza del cosiddetto "passaporto implantare"; ricordiamo infatti che per tutti gli impianti eseguiti negli anni '90 non vi era l'obbligo.


Altra grande difficoltà o impossibilità è quella, dopo diversi anni, di reperire le loro componentistiche protesiche.

L'operatore dentale necessita quindi di una strumentazione, appositamente costruita, per poter identificare con massima precisione l'impianto, allo scopo di procurarsi le componenti connessionali necessarie al nuovo progetto di restauro dentale.

Essi sono identificati con le sigle:

- M - Strumento filettato
- E - Strumento esagonale
- O - Strumento ottagonale
- Q - Strumento quadro

NB: nel kit non sono presenti strumenti per impianti con connessione trilobata e ad esagono esterno considerata la loro facile identificazione.

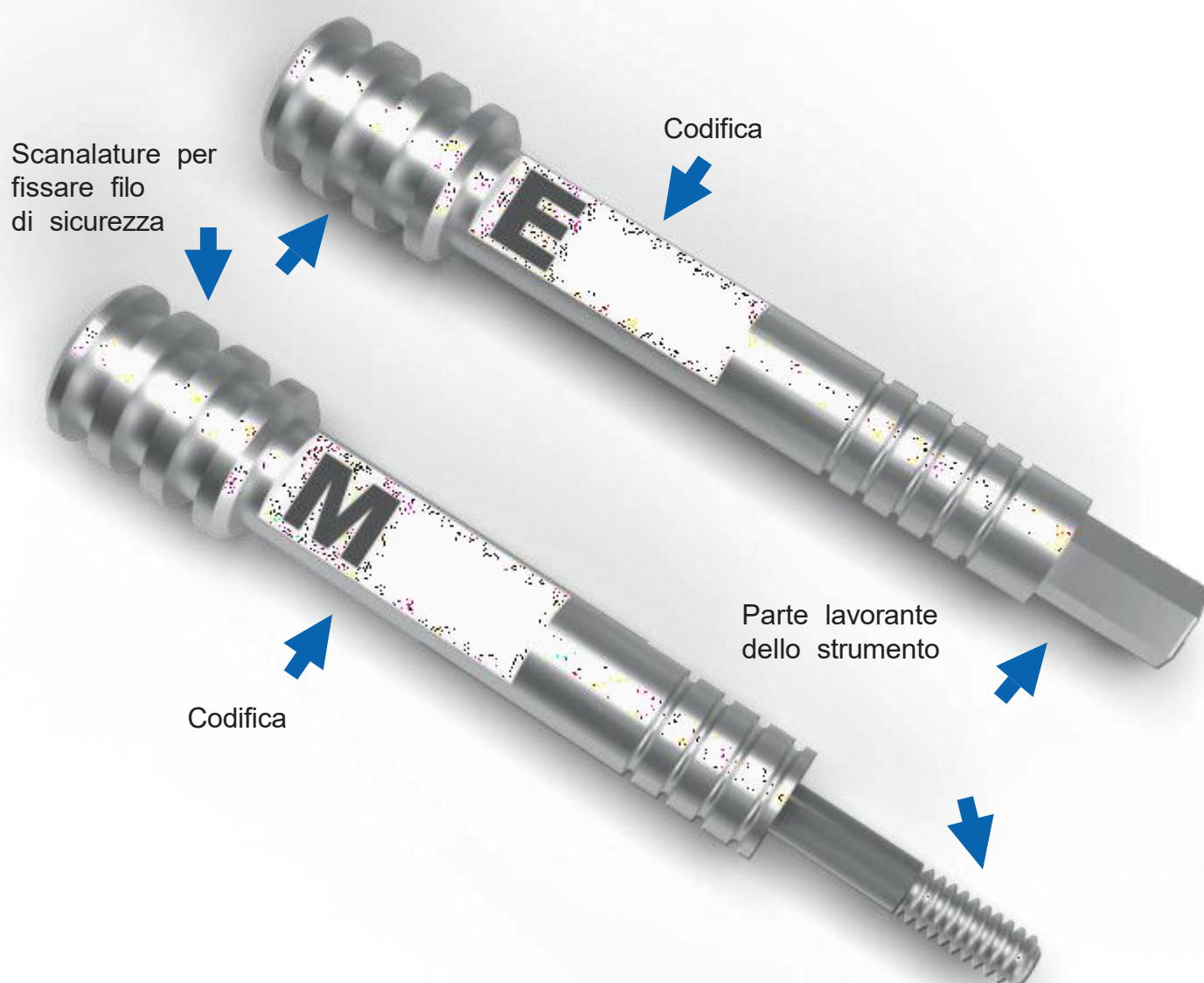

Cosa può fare con identikit il medico dentista?

- Rimuovere sovrastruttura protesica (Foto 01-02).



Foto 01



Foto 02

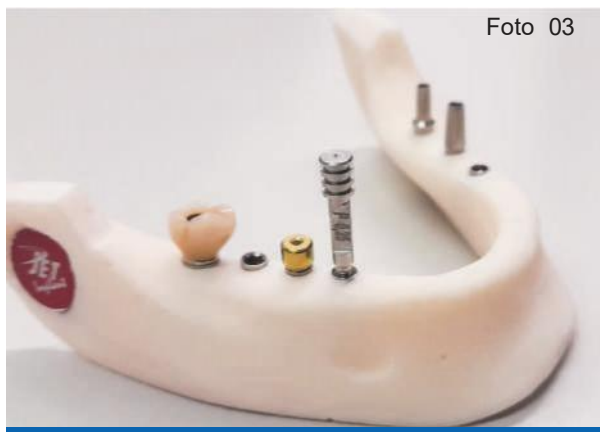


Foto 03





Foto 04

- In primo luogo, può misurare il diametro ed il passo meccanico del filetto endoimplantare (Foto 03).
- In secondo luogo, può conoscere e misurare il sistema di impegno protesico antirotazionale (Foto 04).

Così facendo il medico dentista avrà la certezza di ordinare tutte le componentistiche che necessita per il nuovo progetto riabilitativo.

Come può procedere concretamente il medico dentista? Forniamo un esempio tipo per fare chiarezza sul punto

- Egli dovrà eseguire una radiografia endorale, la quale non dando certezza sulla componentistica da sostituire od ordinare, ha lo scopo di identificare eventuali malformazioni o microfratture del collo implantare o della zona filetto.

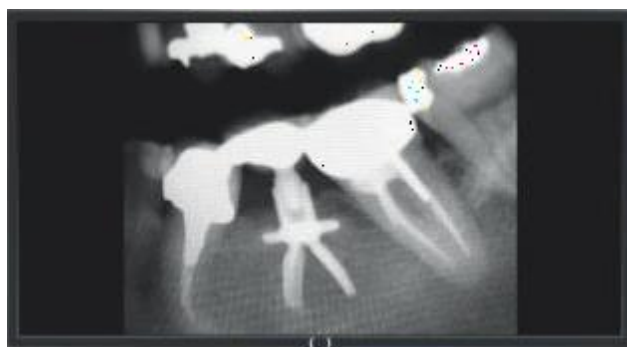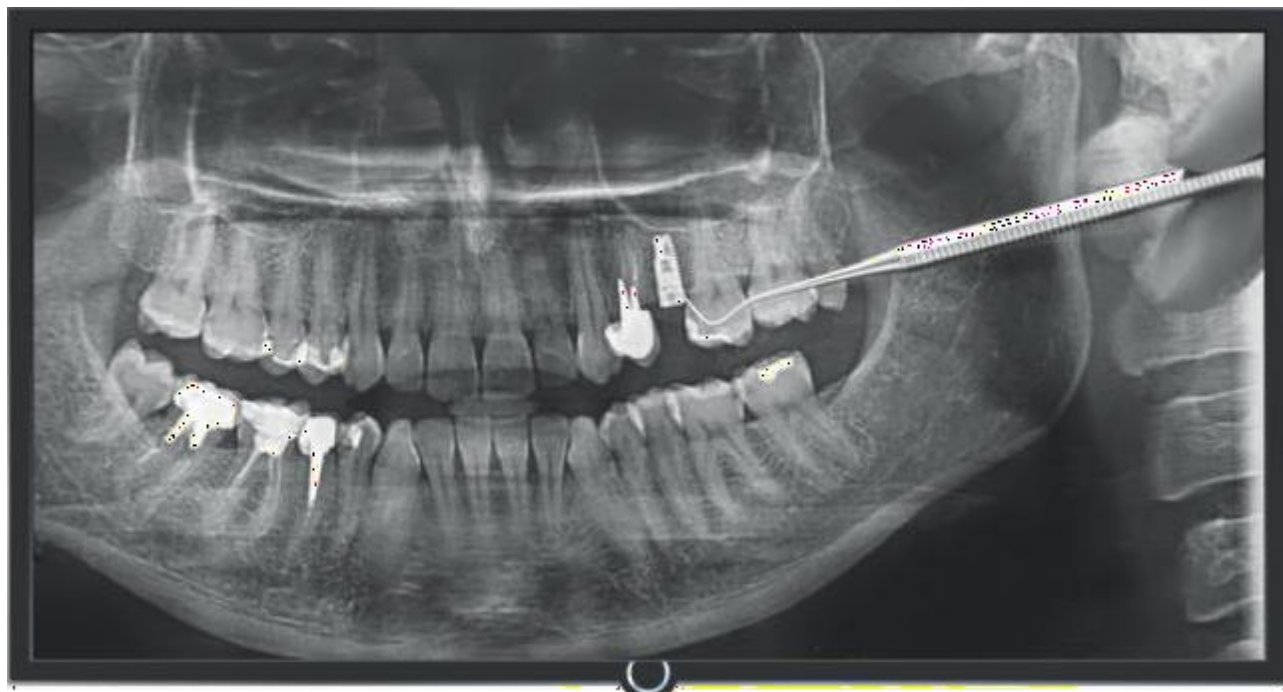

- Se ci sarà una vecchia sovrastruttura protesica da sostituire con una nuova (fusione o pilastratura), l'Identitik di Jetimplant, composto da una numerosa serie di cacciaviti e brugole, permetterà di raggiungere tale scopo.



Bio Clinic
FORNITURE DENTALI

Info e Ordini 392.6238637



- Il Medico dentista dovrà poi accertare con precisione il diametro ed il passo del filetto implantare, aiutandosi con lo strumento filetto segnato nel kit con M. E' importante che si arrivi all'uso di uno strumento M che non ingaggi il filetto nell'impianto (c.d. strumento "non passa").

Il medico prenderà lo strumento M immediatamente prima del "non passa" e così facendo avrà la certezza della precisa identificazione del diametro e del passo del filetto femmina implantare e lo annoterà.



Strumento M con filetto
piccolo
(passa)



Strumento M con filetto
grande
(non passa)



Strumento M con filetto
corretto
(filettatura ottimale)



• Dovrà poi identificare la morfologia antirotazionale dell'impianto: a questo scopo, ricorrerà nell'uso degli strumenti segnati con la lettera E. Troverà l'esagono (o altra morfologia) che con precisione ingaggi nell'impianto. Importante come per il filetto M sarà necessario provare lo strumento E successivo che "non passa" per ottimizzare la ricerca.

Il penultimo strumento sarà quello coretto in termini di fine precisione ed il medico lo annoterà con radiografia e con i due dati (diametro, passo del filetto M – morfologia e diametro dell'ingaggio E) il medico dentista potrà contattare Jetimplant ed ordinare con precisione, evitando così errori, le sovrastrutture necessarie alla nuova riabilitazione protesica



Strumento E con esagono o altra morfologia **piccolo** (passa)



Strumento E con esagono o altra morfologia **grande** (non passa)



Strumento E con esagono o altra morfologia **corretto** (connessione ottimale)



IDENTIKIT

Sezione Merceologica

Sezione Merceologica



Bio Clinic
FORNITURE DENTALI

Info e Ordini 392.6238637



Strumenti M • Strumenti filettati.

M



IDENTIKIT


							
codice	IDM140	IDM150	IDM160	IDM170	IDM180	IDM185	IDM200
							
codice	IDM230	IDM250	IDM300		IDZ230	IDZ300	

Strumenti E • Strumenti esagonali.

E



IDENTIKIT

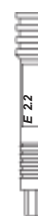							
codice	IDE180	IDE200	IDE208	IDE216	IDE220	IDE226	IDE233
							
codice	IDE240	IDE243	IDE250	IDE260	IDE270	IDE300	

Strumenti O • Strumenti ottagonali.

O



IDENTIKIT

	
codice	IDO250

Strumenti Q • Strumenti quadri.


Q



IDENTIKIT

	
codice	IDQ2X2



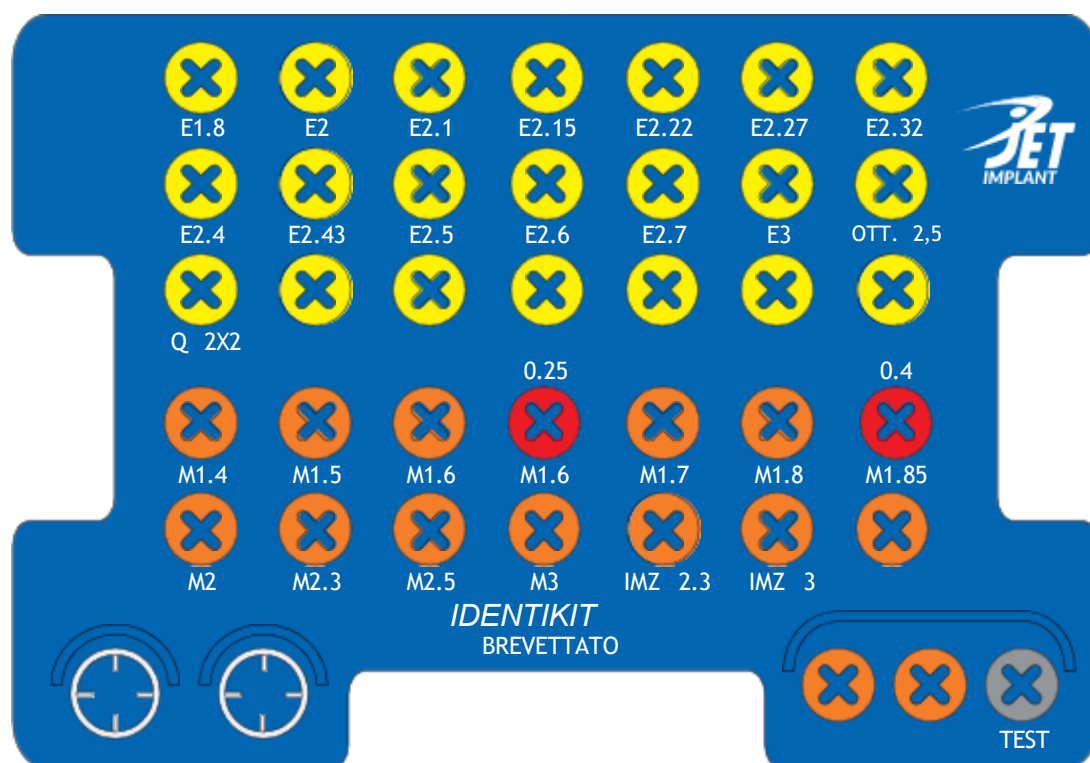

Codice Kit

KIT Identikit JETID1

Contenuto

DESCRIZIONE


- 11 Strumenti Identikit filettati
- 2 Strumenti Identikit filettati IMZ®
- 13 Strumenti Identikit esagonali
- 1 Strumento Identikit quadro
- 1 Strumento Identikit ottagonale

Tutti i codici per il riordino "Strumenti Identikit" sono elencati nella pagina 11

Raccomandazioni:

Identikit è venduto NON sterile quindi prima dell'utilizzo procedere alla sterilizzazione.

Per la detersione non utilizzare sostanze corrosive che possono deteriorare il portaoggetti in alluminio.

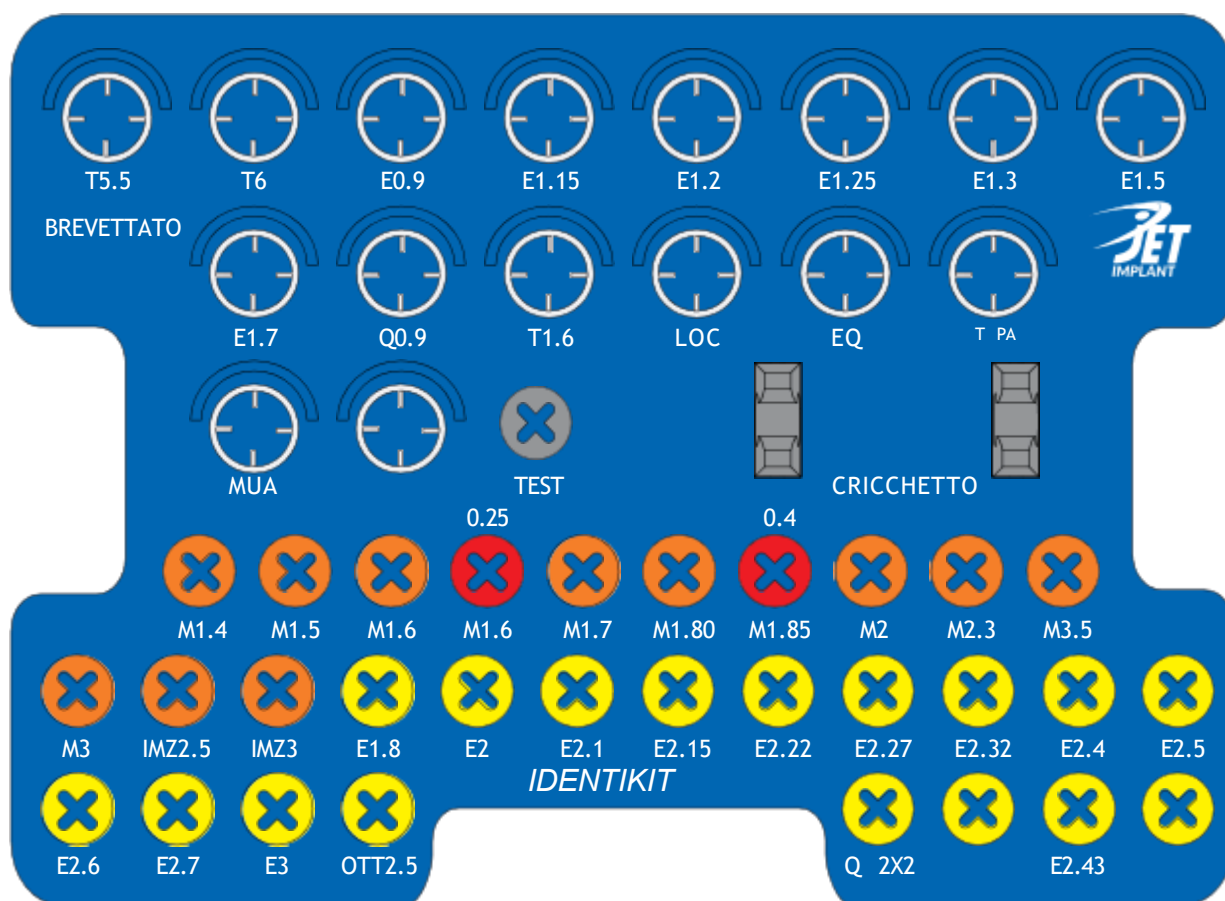

KIT Identikit 2


Codice Kit
JETID2

Contenuto

DESCRIZIONE

- 1 Chiave Torx 5.5
- 1 Chiave Torx 6.0
- 1 Chiave Esagonale 0.9
- 1 Chiave Esagonale 1.15
- 1 Chiave Esagonale 1.2
- 1 Chiave Esagonale 1.25
- 1 Chiave Esagonale 1.3
- 1 Chiave Esagonale 1.5
- 1 Chiave Esagonale 1.7
- 1 Chiave Quadra 0.9
- 1 Chiave Taglio 1.6
- 1 Chiave Locator
- 1 Chiave Equator
- 1 Chiave TPA
- 1 Chiave Multy Unit
- 1 Cricchetto

- Codice
- JETT55
 - JETT60
 - JETE09
 - JETE115
 - JETE12
 - JETE125
 - JETE13
 - JETE15
 - JETE17
 - JETQ09
 - JETTA16
 - JETLOC
 - JETEQU
 - JETTPA
 - JETMUN
 - JETCR1

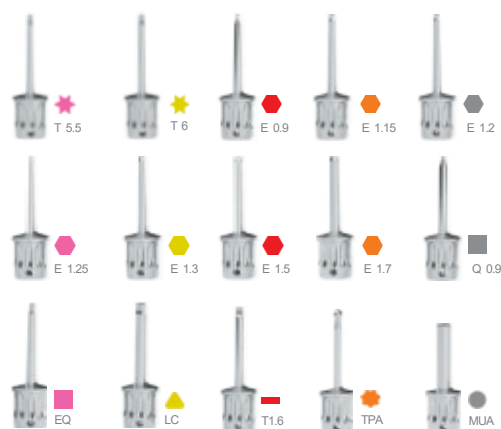

Importante:
Le chiavi sono da utilizzare SOLO
per la rimozione della
protesi/sovrastuttura dalla fixture
implantare

- 11 Strumenti Identikit filettati
- 2 Strumenti Identikit filettati IMZ®
- 13 Strumenti Identikit esagonali
- 1 Strumento Identikit quadro
- 1 Strumento Identikit ottagonale

Tutti i codici per il riordino "Strumenti Identikit" sono elencati nella pagina 11



EQUIPARABILI

Abutment e sovrastrutture implantologiche

Sezione Merceologica



Bio Clinic
FORNITURE DENTALI

Info e Ordini 392.6238637



EQUIPARABILI

Abutment e sovrastrutture implantologiche

Sezione Merceologica

Protesica Rimovibile ha elaborato il seguente catalogo dal titolo "Equiparabili".
Lo scopo di Equiparabili è quello di soddisfare medici ed odontotecnici proponendo una vasta gamma di abutment e sovrastrutture per l'implantologia.

Le diverse linee protesiche così suddivise permettono al medico e all'odontotecnico di riconoscere con facilità ciò di cui necessita.

Equiparabili infatti mette a disposizione un elenco di prodotti facilmente consultabile per una ricerca immediata tra le diverse linee protesiche, soprattutto quelle di cui non si ha traccia identificativa.

Un'accurata ricerca effettuata con medici ed odontotecnici con esperienza trentennale sul mercato ha permesso di selezionare le linee più richieste che si sono sviluppate negli ultimi anni e che vengono qui riportate.

Particolarità di Equiparabili è che nella sezione "accessori" sono presenti due Kit cacciaviti: il Kit cacciaviti 118 ed il Kit cacciaviti laboratorio.


Entrambi i Kit sono composti da strumenti universali per l'implantprotesi, utilizzabili per il serraggio delle componentistiche protesiche implantari.

Protesica Rimovibile è orgogliosa di poter espandere il proprio campo di prodotti, spaziando così tra diverse tipologie di connessioni implantari.

Il catalogo è disponibile anche in versione PDF sul sito www.protesicarimovibile.com



**BREVETTO
2020**

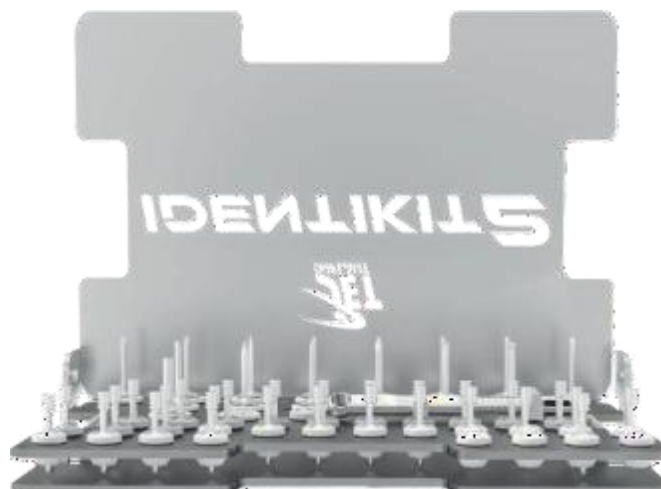

IDENTIKIT



di Pravatà Ivan
Via Boves, 5
13039 – Trino (VC)

Tel. / WhatsApp : **392.6238637**

E-mail : **bioclinic2020@gmail.com**