




Bio Clinic

FORNITURE DENTALI

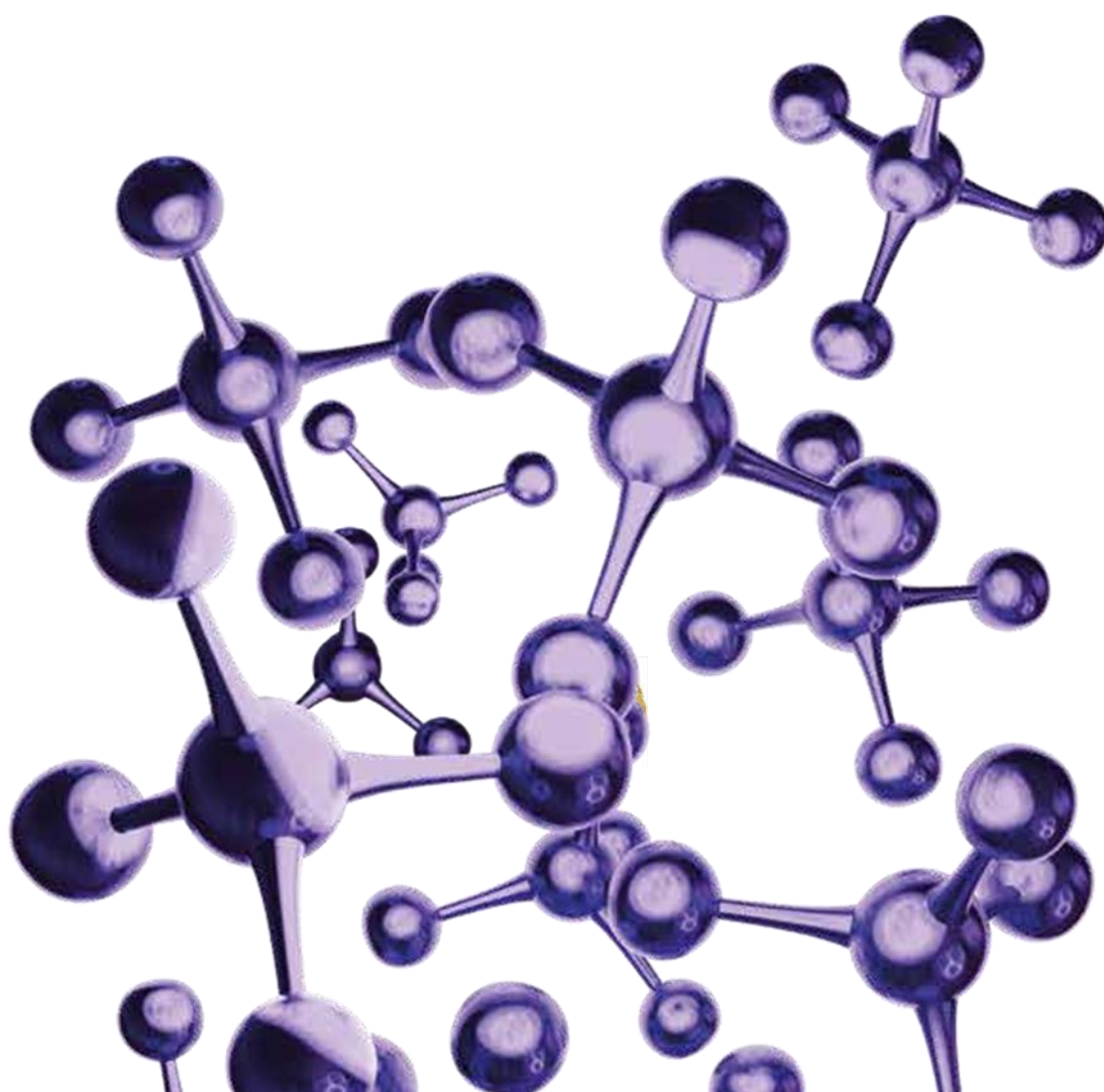

Catalogo Sostituti Ossei 2026

Versione 1.0






	Pag.
Linea C-Bone (Idrossiapatite)	03-05
Linea C-BoneX (Osso Equino)	06-09
Membrana Corticale	09
Bond Apatite (Cemento Osseo 3D)	10-11
Linea MAGGI (Osso Equino)	12-15
Membrana in Pericardio	15
Membrana in Collagene	16
Membrana in PTFE	17
ELEVO (kit rialzo del seno)	18-19



C-BONE La Struttura della Rigenerazione Idrossiapatite nano-strutturata bio-mimetica

C-BONE è l'innovativa linea di sostituti ossei di sintesi a base di idrossiapatite nano-strutturata. L'idrossiapatite di C-Bone è un composto di calcio fosfato straordinariamente simile alla matrice minerale dell'osso umano, sia per composizione, sia per struttura e dimensione dei nano-cristalli. Il suo rapporto Ca/P di 1.67 è identico a quello dell'apatite ossea naturale. C-Bone è disponibile in granuli, chips, pasta iniettabile e crunch malleabile in un'ampia gamma di formati e quantità.

C-BONE è un sostituto osseo bio-mimetico e il suo elevatissimo rapporto superficie/volume lo rende uno scaffold ideale per l'osteointegrazione e la rigenerazione dei difetti ossei. La struttura altamente porosa e interconnessa svolge un'azione osteoconduttiva ottimale, favorendo la colonizzazione cellulare, la circolazione delle sostanze nutritive e una rapida vascolarizzazione. Grazie alla loro specifica composizione e alla dimensione nano-metrica dei cristalli, i sostituti ossei C-Bone vengono completamente degradati dall'attività osteoclastica e fisiologicamente rimodellati in un nuovo tessuto osseo vitale.

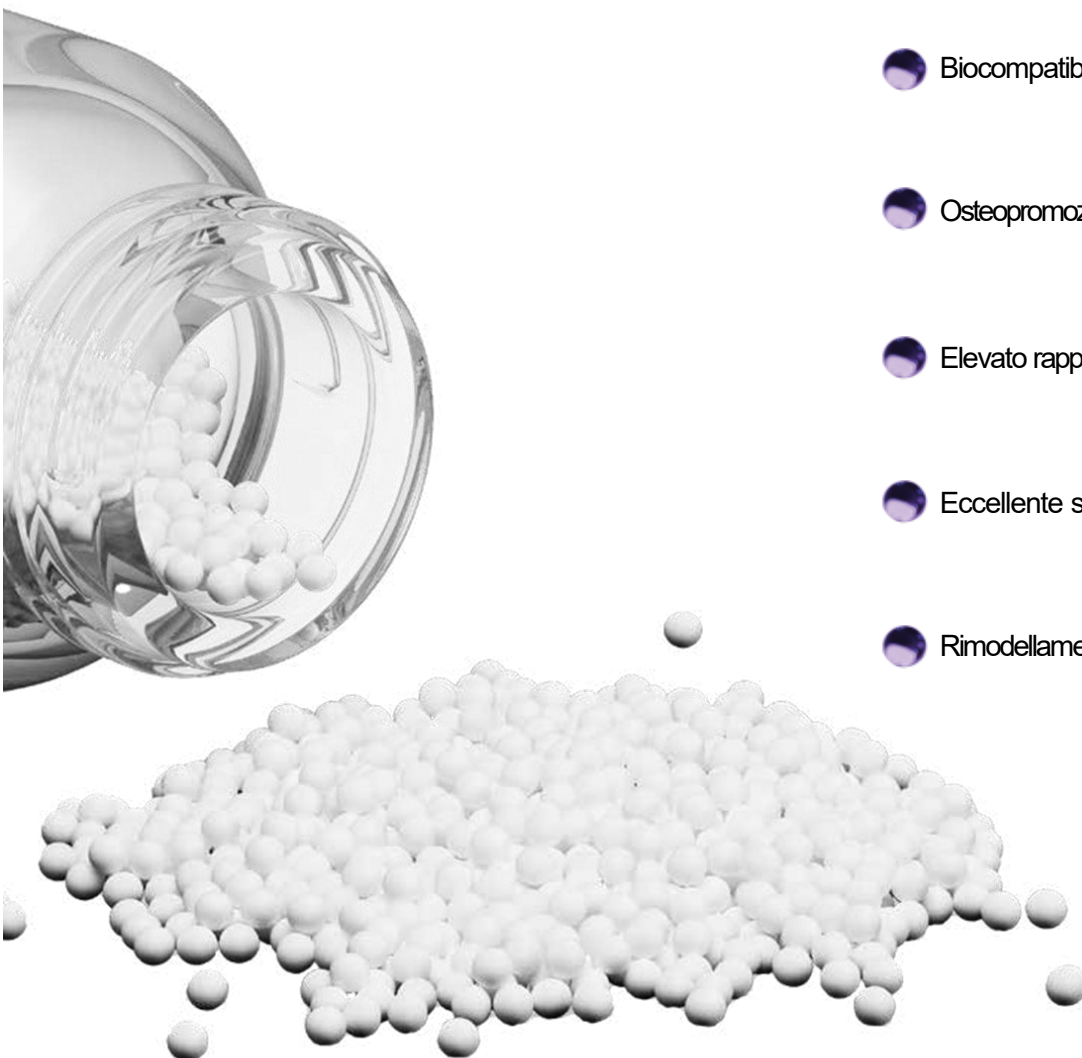

- Biocompatibilità totale
- Osteopromozione e osteoconduzione ottimali
- Elevato rapporto superficie/volume
- Eccellente stabilità chimico-fisica
- Rimodellamento completo in tempi fisiologici



C-Bone Granuli Porosi

INDICAZIONI: Riempimento di piccoli e medi difetti ossei, rialzi e grandi rialzi di seno mascellare, difetti peri-implantari e alveoli post-estrattivi.



Codice	Descrizione	Granulometria	CC	Conf.	Riassorbimento	Listino
CBO-P0501	granuli porosi	0.5-1 mm	0.5	1 Pz.	6-8 mesi	€ 44,00
CBO-P0506	granuli porosi	0.5-1 mm	0.5	6 Pz.	6-8 mesi	€ 249,00
CBO-P1001	granuli porosi	0.5-1 mm	1.0	1 Pz.	6-8 mesi	€ 69,00
CBO-P1006	granuli porosi	0.5-1 mm	1.0	6 Pz.	6-8 mesi	€ 369,00
CBO-P20101	granuli porosi	1-2 mm	1.0	1 Pz.	6-8 mesi	€ 69,00
CBO-P20201	granuli porosi	1-2 mm	2.0	1 Pz.	6-8 mesi	€ 104,00
CBO-P20501	granuli porosi	1-2 mm	5.0	1 Pz.	6-8 mesi	€ 159,00
CBO-P050S1	granuli porosi con "filter cap"	0.5-1 mm	0.5	1 Pz.	6-8 mesi	€ 79,00
CBO-P050S3	granuli porosi con "filter cap"	0.5-1 mm	0.5	3 Pz.	6-8 mesi	€ 189,00

C-Bone Pasta iniettabile

Pasta iniettabile composta da una miscela ad alta densità di nano-cristalli e micro-polvere di idrossiapatite nano-strutturata, in una soluzione acquosa tamponata a pH fisiologico; disponibile in un ampio range di formati (da 0.25 cc a 14 cc). Per favorire una applicazione in situ, all'interno della confezione è disponibile un sottile beccuccio.

INDICAZIONI:

Riempimento di difetti parodontali e peri-implantari, aumento del seno mascellare per via crestale.

Codice	Descrizione	CC	Conf.	Riassorbimento	Listino
CBO-PA0501	pasta iniettabile in siringa	0.5	1 Pz.	6-8 mesi	€ 69,00
CBO-PA0503	pasta iniettabile in siringa	0.5	3 Pz.	6-8 mesi	€ 179,00
CBO-PA1001	pasta iniettabile in siringa	1.0	1 Pz.	6-8 mesi	€ 89,00
CBO-PA1003	pasta iniettabile in siringa	1.0	3 Pz.	6-8 mesi	€ 239,00





C-Bone Crunch malleabile

Igranulometrial formato Crunch, grazie all'aggiunta di micro-granuli a specifica, presenta una concentrazione di idrossiapatite nano-strutturata più elevata della pasta iniettabile, risultando estremamente malleabile e stabile anche in ambiente sanguinolento.

Le siringhe "open-mouth" permettono l'estrusione del prodotto sotto forma di un cilindro plastico, conformabile e adattabile alle più diverse esigenze d'impianto.

INDICAZIONI:

Riempimento di difetti ossei paradontali, perimplantari e post-estrattivi; rialzo del seno con accesso vestibolare.




Codice	Descrizione	CC	Conf.	Riassorbimento	Listino
CBO-CR0501	crunch malleabile	0.5	1 Pz.	6-8 mesi	€ 69,00
CBO-CR0503	crunch malleabile	0.5	3 Pz.	6-8 mesi	€ 159,00
CBO-CR1001	crunch malleabile	1.0	1 Pz.	6-8 mesi	€ 79,00
CBO-CR1003	crunch malleabile	1.0	3 Pz.	6-8 mesi	€ 219,00

C-Bone Granuli Densi

INDICAZIONI: Riempimento di piccoli e medi difetti ossei, rialzi e grandi rialzi di seno mascellare, difetti peri-implantari e post-estrattivi.

Codice	Descrizione	Granulometria	CC	Conf.	Riassorbimento	Listino
CBO-D0501	granuli densi	0.5-1 mm	0.5	1 Pz.	12-14 mesi	€ 44,00
CBO-D0506	granuli densi	0.5-1 mm	0.5	6 Pz.	12-14 mesi	€ 249,00
CBO-D1001	granuli densi	0.5-1 mm	1.0	1 Pz.	12-14 mesi	€ 69,00
CBO-D1006	granuli densi	0.5-1 mm	1.0	6 Pz.	12-14 mesi	€ 369,00
CBO-D2001	granuli densi	0.5-1 mm	2.0	1 Pz.	12-14 mesi	€ 104,00
CBO-D20201	granuli densi	1-2 mm	2.0	1 Pz.	12-14 mesi	€ 104,00

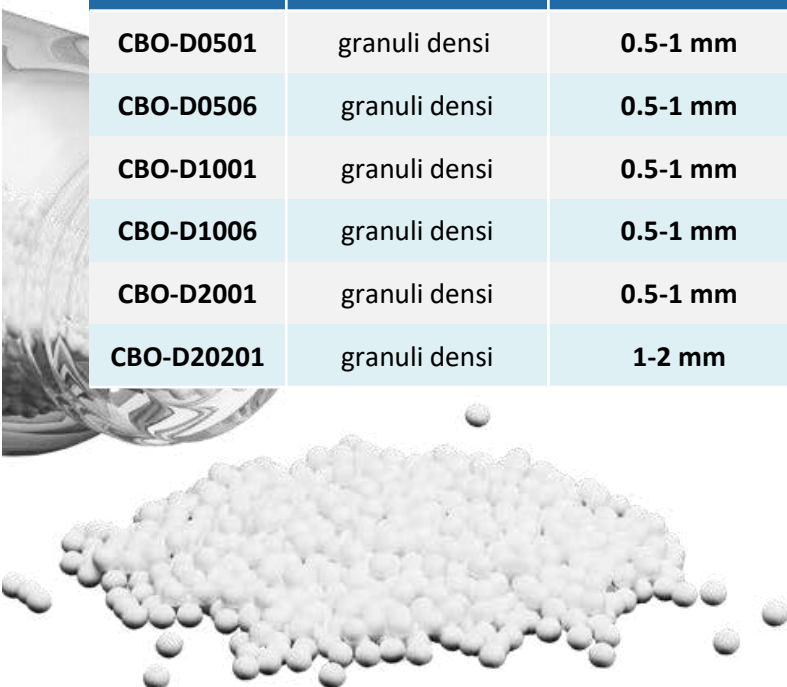



La Biocompatibilità Naturale - Sostituti ossei di origine naturale

C-Bone^X è la linea di **sostituti ossei naturali di origine equina** sviluppata attraverso il processo EstRem (Esterification Cell-Removal Technology).

Questo innovativo “tissue processing” – utilizzato per ottenere la configurazione **C-Bone^X MATRIX** – permette di trattare tutti i tessuti connettivi di origine animale e ottenere sostituti tissutali totalmente biocompatibili, preservando le caratteristiche biologiche fondamentali per il processo di rigenerazione.

Gli innesti della configurazione **C-Bone^X DEM** sono invece ottenuti a seguito di un’ulteriore fase di demineralizzazione controllata: pur mantenendo la struttura osteoconduttiva tridimensionale tipica delle matrici ossee, sono estremamente flessibili e in grado di adattarsi facilmente anche a difetti ossei con profili e superfici curvilinee.


Infine **C-Bone^X APATITE**, costituita da pura idrossiapatite naturale, è ottenuta attraverso un ulteriore processo di termocatalisi controllata. Le sue eccellenti proprietà osteoconduttive permettono la formazione di nuovo tessuto osseo vascolarizzato tra gli spazi della sua struttura porosa e quelli intergranulari, consentendo una rapida e completa osteointegrazione degli innesti.





C-BoneX Matrix Block

- Rispetto delle caratteristiche biologiche e biomeccaniche proprie del tessuto osseo
- Scaffold naturale per un'osteconduzione ottimale
- Rimodellamento completo in modalità e tempi fisiologici
- Ampia gamma di innesti granulari e blocchetti di osso spongioso

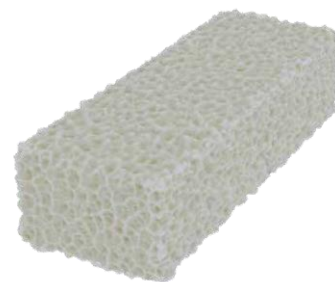

C-Bone X MATRIX è la linea di sostituti ossei naturali di origine equina a matrice extra-cellulare interamente preservata, prodotti tramite il processo brevettato EstRem che ne garantisce il più alto profilo di sicurezza e biocompatibilità, preservandone tutte le caratteristiche biologiche e bio-meccaniche funzionali alla rigenerazione tissutale.

Indicazione: trattamento dei difetti parodontali e peri-implantari; preservazione dell'alveolo postestrattivo; piccoli e grandi rialzi di seno; aumenti orizzontali e verticali di cresta.

Codice	Descrizione	Misure	Conf.	Riassorbimento	Listino
CXM-SB1020F1	blocco spongioso	10 x 20 x 6 mm	1 Pz.	4-6 mesi con un rimodellamento completo tra 8-12 mesi	€ 129,00

C-BoneX DEM Piastrina di Osso Spongioso Flessibile

Lamina di osso spongioso parzialmente demineralizzato.

Una volta reidratata diviene morbida e flessibile e adatta all'impiego nelle procedure di aumenti orizzontali o verticali di cresta e grandi rialzi di seno.



Codice	Descrizione	Conf.	Listino	Riassorbimento
CXD-SP2525D1	25 x 25 x 3 mm	1 Pz.	€169,00	4-6 Mesi
CXD-SP2030D1	20 x 30 x 3 mm	1 Pz.	€ 169,00	

C-BoneX DEM Lamina Corticale

Lamina di osso corticale demineralizzato. Una volta reidratata diviene morbida e flessibile. Adatta alla ricostruzione di difetti a 2 o 3 pareti. Può essere sagomata e forata e richiede di essere fissata con pin o miniviti.



Codice	Descrizione	Conf.	Listino	Riassorbimento
CXD-CP2525C1	25 x 25 x 0,5-1 mm	1 Pz.	€ 169,00	8-12 Mesi

**C-Bone[®]EX Matrix***Granuli di spongiosa con "filter cap"*

Indicazioni : Trattamento dei difetti parodontali e peri-implantari; preservazione dell'alveolo postestrattivo; piccoli e grandi rialzi di seno; aumenti orizzontali e verticali di cresta.

Codice	Descrizione	Granulometria	Cc	Conf.	Riassorbimento	Listino
CXM-S001S	granuli in siringa	0.5-1 mm	0.5	1 Pz.	4-6 mesi	€ 94,00
CXM-S003S	granuli in siringa	0.5-1 mm	0.5	3 Pz.	4-6 mesi	€ 249,00

C-Bone[®]EX Matrix Granuli di spongiosa

Indicazioni : Trattamento dei difetti parodontali e peri-implantari; preservazione dell'alveolo postestrattivo; piccoli e grandi rialzi di seno; aumenti orizzontali e verticali di cresta.

Riassorbimento

4-6 mesi

Codice	Descrizione	Granulometria	Cc	Conf.	Listino
CXM-S011	granuli di spongiosa	0.25-1 mm	1.0	1 Pz.	€ 69,00
CXM-S016	granuli di spongiosa	0.25-1 mm	1.0	6 Pz.	€ 349,00
CXM-S021	granuli di spongiosa	0.25-1 mm	2.0	1 Pz.	€ 119,00
CXM-S026	granuli di spongiosa	0.25-1 mm	2.0	6 Pz.	€ 649,00
CXM-S041	granuli di spongiosa	0.25-1 mm	4.0	1 Pz.	€ 179,00

**C-Bone[®]EX Matrix Granuli corticali**

Indicazioni : Trattamento dei difetti parodontali e peri-implantari; preservazione dell'alveolo postestrattivo; piccoli e grandi rialzi di seno; aumenti orizzontali e verticali di cresta.

Codice	Descrizione	Granulometria	Cc	Conf.	Riassorbimento	Listino
CXM-C011	Granuli corticali	0.5-1 mm	1.0	1 Pz.	8-12 mesi	€ 69,00
CXM-C016	Granuli corticali	0.5-1 mm	1.0	6 Pz.	8-12 mesi	€ 349,00

**C-Bone^X Matrix Granuli Mix**

Riassorbimento

8-12 mesi

Indicazioni : Trattamento dei difetti parodontali e peri-implantari; preservazione dell'alveolo postestrattivo; piccoli e grandi rialzi di seno; aumenti orizzontali e verticali di cresta.

Codice	Descrizione	Granulometria	Cc	Conf.	Listino
CXM-M001	granuli MIX	0.25-1 mm	0.5	1 Pz.	€ 59,00
CXM-M006	granuli MIX	0.25-1 mm	0.5	6 Pz.	€ 299,00
CXM-M011	granuli MIX	0.25-1 mm	1.0	1 Pz.	€ 79,00
CXM-M016	granuli MIX	0.25-1 mm	1.0	6 Pz.	€ 399,00

**C-Bone^X APATITE**

- Eliminazione di tutte le componenti organiche
- Conservazione del solo minerale osseo sotto forma di idrossiapatite naturale
- Tessuto completamente sicuro e biocompatibile
- Eccellente osteoconduzione e mantenimento del volume implantare
- Ottima integrazione ossea, lento riassorbimento e lunga permanenza nel sito implantare

C-Bone X APATITE è indicato in tutti quei casi dove si vuole limitare o ritardare il riassorbimento dell'innesto per mantenerne il volume nel tempo in modo stabile.

Indicazioni : riempimento di difetti ossei di piccole e medie dimensioni; rialzi di seno mascellare; difetti perimplantari e alveoli post-estrattivi.

Codice	Descrizione	Granulometria	CC	Conf.	Riassorbimento	Listino
CXA-S001	granuli di spongiosa	0.25-1 mm	0.5	1 Pz.	> 12 mesi	€ 59,00
CXA-S006	granuli di spongiosa	0.25-1 mm	0.5	6 Pz.	> 12 mesi	€ 299,00
CXA-S011	granuli di spongiosa	0.25-1 mm	1.0	1 Pz.	> 12 mesi	€ 79,00
CXA-S016	granuli di spongiosa	0.25-1 mm	1.0	6 Pz.	> 12 mesi	€ 419,00
CXA-S021	granuli di spongiosa	0.25-1 mm	2.0	1 Pz.	> 12 mesi	€ 119,00
CXA-S026	granuli di spongiosa	0.25-1 mm	2.0	6 Pz.	> 12 mesi	€ 629,00
CXA-S041	granuli di spongiosa	0.25-1 mm	4.0	1 Pz.	> 12 mesi	€ 199,00


C-Bone^X DEM Membrana Corticale

Membrana in osso corticale demineralizzato per protezione prolungata nella ricostruzione di difetti ossei severi. Una volta reidratata può essere piegata per conformarsi al sito di impianto. La membrana necessita di fissazione.

Codice	Descrizione	Conf.	Listino
CXD-CM2525A1	25 x 25 x 0.2 mm	1 Pz.	€ 169,00

Tempo di protezione

6 Mesi

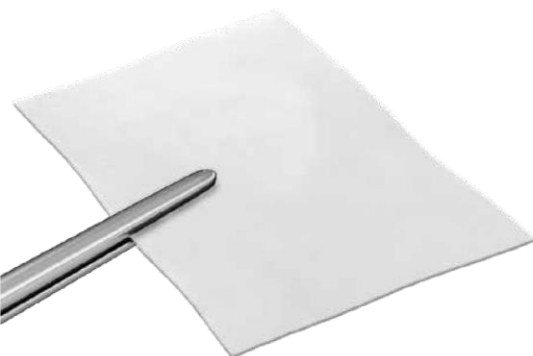



Bond Apatite®

Innesto osseo adesivo 3D Bond di ultima generazione **SENZA l'utilizzo di membrane**

È un prodotto osteoconduttivo sintetico utilizzato come materiale di riempimento rigenerativo destinato a colmare, aumentare e ricostruire diversi tipi di atrofia ossee : è innovativo e brevettato, supportato da basi scientifiche, rappresenta una vera e propria rivoluzione nella chirurgia rigenerativa ossea.

BOND APATITE® È COMPOSTO DA 2 MATRICI CHE PRESENTANO CARATTERISTICHE E VELOCITÀ DI ASSORBIMENTO DIVERSE:



La prima matrice è costituita da solfato di calcio bifasico puro (66%), che va incontro ad un completo riassorbimento e ad una sostituzione con nuovo osso umano.

La seconda matrice è formata da una piccola quantità di idrossiapatite sintetica (33%) caratterizzata da particelle di granulometria diversa, a lento riassorbimento, che funge da mantentore di spazio per un ottimo controllo della conservazione del volume progettato in fase diagnostica.

CARATTERISTICHE:

Il materiale per innesto "ALL IN ONE" più veloce ed efficiente in commercio:

- ☒ Biocompatibile.
- ☒ Batteriostatico.
- ☒ Effetto e comportamento adesivo.
- ☒ Stabilità primaria dell'innesto al 100% = nessuna membrana richiesta.
- ☒ Effetto barriera.
- ☒ Rigenerazione rapida.
- ☒ Formazione ossea in 3 mesi.
- ☒ Assenza di contaminazione batterica : può essere esposto fino a 3 mm.
- ☒ Chirurgia minimamente invasiva = meno traumi.

INDICAZIONI:

Il materiale ideale di riempimento:

- ☒ Rigenerazione di difetti ossei.
- ☒ Riempimento e conservazione degli innesti chirurgici a nido d'ape.
- ☒ Difetti parodontali.
- ☒ Aumento laterale della cresta senza necessità di membrane e micro viti.
- ☒ Chirurgia del rialzo di seno mascellare con tecnica aperta/chiusa.
- ☒ Deiscenza.
- ☒ Fenestrazioni.

Conf. n°01 siringa
€ 139,00



Metodo di applicazione in tre semplici passaggi

Posizionamento



Compressione



Chiusura



- ☒ Non vi è alcuna conversione in tessuto cicatriziale: il solfato di calcio bifasico non è biologico e non può convertirsi in tessuto connettivo fibroso come allotrapianto / autotrapianto / xenotrapianto.
- ☒ Non c'è infezione a causa del materiale – il materiale è inorganico e quindi non sarà soggetto all'assalto batterico come fanno le particelle di allotrapianto / autotrapianto. Inoltre, **NON** è particolato come altri Xenotrapianti / Alloplastici e quindi non ospiterà batteri nella sua struttura porosa per infettare il sito di futuri impianti. Il solfato di calcio bifasico, tuttavia, produrrà meno di risultati ottimali se non vengono seguiti i protocolli di posizionamento chirurgico.
- ☒ Gli apparecchi rimovibili che premono e si spostano sul sito innestato causeranno la riduzione o l'eliminazione del volume dell'innesto.
- ☒ Il paziente non segue le istruzioni postoperatorie; causerà la riduzione o l'eliminazione del volume dell'innesto.

RICHIEDI IL VIDEO CORSO E I PROTOCOLLI

Tramite WhatsApp : **392.6238637**

Tramite e-mail : **bioclinic2020@gmail.com**

Tessuti ossei e membrane di origine equina



TESSUTO OSSEO LA TECNOLOGIA E L'ESPERIENZA

Tessuti ossei di origine naturale provenienti da equini spagnoli

Scaffold osseo preservato ^{1,2}

La Maggi srl opera dal 1995 nel settore della deantigenizzazione di tessuti ossei equini. Questo tipo di materiale trova sempre maggior utilizzo nel campo della rigenerazione ossea supportato da numerosi studi ^{3,4}



Ha una struttura morfologica e una composizione chimica molto simile al tessuto osseo umano. ⁵

Nella porzione di femore equino utilizzata per ottenere la materia prima la morfologia del tessuto osseo è comparabile a quella umana.



Non esistono patologie trasmissibili tra equino e uomo.



La deantigenizzazione a base enzimatica consente di mantenere intatta la microstruttura ⁶ del cristallo osseo garantendo una rapida osteointegrazione e tempi di riassorbimento fisiologici entro i 12 mesi.



La materia prima deriva da equini di origine spagnola destinati al consumo alimentare umano e sottoposti a controllo del sistema veterinario e delle autorità competenti.



TESSUTO OSSEO UMANO



TESSUTO OSSEO EQUINO



OSTEOGEN

TESSUTO OSSEO GRANULARE LIOFILIZZATO EQUINO

-  Tessuto osseo decollagenato
-  Facile da posizionare grazie alla sua elevata idrofilia
-  Riassorbibile in un periodo di 6 - 12 mesi
-  °C Deantigenato mediante sistema enzimatico a 37°C 7
-  Sterilizzato con raggi beta
-  Conservabile a temperatura ambiente per 5 anni



Descrizione del prodotto	Dimensioni particolato	Peso/Volume	Codice	Listino
Granulato spongioso Tappo ●	0,5 - 1 mm	0,25 gr. / 0,5 cc. 0,5 gr. / 1 cc.	MGB001 MGB002	€ 56,00 € 100,00
Granulato spongioso Tappo ●	1 - 2 mm	0,5 gr. / 1,25 cc.	MGB005	€ 108,00
Granulato cortico-spongioso Tappo ●	0,5 - 1 mm	0,5 gr. / 1 cc.	MGB008	€ 108,00

OSTEOGEN GEL

PASTA DI TESSUTO OSSEO GRANULARE LIOFILIZZATO EQUINO

-  Tessuto osseo decollagenato
-  Facile da posizionare grazie alla sua elevata idrofilia
-  Riassorbibile in un periodo di 6 - 12 mesi
-  °C Deantigenato mediante sistema enzimatico a 37°C 7
-  Sterilizzato con raggi beta
-  Conservabile a temperatura ambiente per 5 anni



Descrizione del prodotto	Dimensioni particolato	Peso/Volume	Codice	Listino
Granulato spongioso Tappo ●	0,5 - 1 mm	0,5 gr. / 1 cc.	MGB010	€ 120,00
Granulato cortico-spongioso Tappo ●	0,5 - 1 mm	0,5 gr. / 1 cc.	MGB011	€ 128,00

BIOPLANT

TESSUTO OSSEO GRANULARE LIOFILIZZATO CON COLLAGENE OSSEO IN IDROGEL

-  Tessuto osseo con collagene
-  Pronto per l'uso
-  Riassorbibile in un periodo che va dai 4 ai 6 mesi
-  Deantigenato mediante sistema enzimatico a 37°C
-  Sterilizzato con raggi beta
-  Conservabile a temperatura ambiente per 5 anni



Descrizione del prodotto	Dimensioni particolato	Peso/Volume	Codice	Listino
Spongioso in gel	0,5 - 1 mm	0,5 gr. / 1 cc.	MGB026	€ 156,00
Cortico-spongioso in gel con DBM (matrice ossea demineralizzata per favorire la rigenerazione ossea)	0,5 - 1 mm	0,5 gr. / 1 cc.	MGB027	€ 224,00

BIOPLANT BLOCCHI

TESSUTO OSSEO IN BLOCCO SPONGIOSO EQUINO

-  Tessuto osseo naturale contenente collagene nativo
-  Dopo reidratazione diventa facilmente manipolabile (fresare, tagliare ecc.)
-  Riassorbibile in un periodo di 8 - 12 mesi
-  Si può fissare con viti senza pre foratura
-  Deantigenato mediante sistema enzimatico a 37°C
-  Sterilizzato con raggi beta
-  Conservabile a temperatura ambiente per 5 anni



Descrizione del prodotto	Dimensioni	Volume	Codice	Listino
Biopiant blocco spongioso	10 x 10 x 20 mm	2 cc	MGB012	€ 160,00
	20 x 20 x 10 mm	4 cc	MGB013	€ 320,00
	20 x 15 x 8 mm	2,4 cc	MGB014	€ 200,00



BIOPLANT ELASTA

PIASTRA OSSEA FLESSIBILE EQUINO

-  30% idrossiapatite e 70% collagene osseo endogeno esposto mediante demineralizzazione parziale
-  Dopo reidratazione diventa flessibile e ritagliabile
-  Riassorbibile in 2 - 4 mesi
-  Si può fissare con viti o pin senza preforatura
-  °C Deantigenato mediante sistema enzimatico a 37°C
-  Sterilizzato con raggi beta
-  Conservabile a temperatura ambiente per 5 anni



Descrizione del prodotto	Dimensioni	Volume	Codice	Listino
Piastra spongiosa flessibile	25 x 25 x 3 mm	1,9 cc	MGB015	€ 228,00
	40 x 40 x 3 mm	4,8 cc	MGB016	€ 576,00
	30 x 20 x 3 mm	1,8 cc	MGB017	€ 216,00
	50 x 25 x 3 mm	3,7 cc	MGB018	€ 448,00
	50 x 50 x 3 mm	7,5 cc	MGB019	€ 900,00
Blocchi spongiosi flessibili	10 x 10 x 10 mm	1 cc	MGB020	€ 200,00

Exaflex

MEMBRANA BILAYER IN PERICARDIO BOVINO AD ALTA DENSITA'

-  Eccellente manipolazione dopo reidratazione
-  Totalmente riassorbibile nel lungo periodo
-  Resistente e semplice da fissare
-  L'effetto barriera viene garantito dopo 4 mesi dalla sua deposizione
-  100% biocompatibile
-  Sterilizzata con raggi beta
-  Conservabile a temperatura ambiente per 5 anni

La Maggi srl ha sviluppato la membrana EXAFLEX in pericardio bovino bilayer. Questa membrana è ideale come barriera selettiva per la sua naturale composizione bi-strato con fibre di collagene multi direzionali intrecciate di tipo I.



Descrizione del prodotto	Dimensioni	Codice	Listino
Membrana in pericardio bovino	25 x 25 x 0,2 mm	MGB021	€ 120,00
	30 x 30 x 0,3 mm	MGB022	€ 172,00
	30 x 40 x 0,3 mm	MGB023	€ 232,00
Membrana in pericardio bovino	14 x 25 x 0,2 mm	MGB024	€ 80,00



Membrana di Collagene per GTR è una membrana riassorbibile per la protezione del sito implantare dall'infiltrazione dei tessuti molli, costituita da atelocollagene di tipo I di origine equina, altamente purificato. Può essere facilmente posizionata in loco e non richiede fissazione. La sua struttura tridimensionale si adatta alla superficie dell'innesto osseo fornendo uno scudo naturale al sito d'impianto e riassorbendosi in circa 4-6 settimane. C-Membrane è disponibile in un'ampia gamma di formati, in confezioni singole e multiple.

C-Membrane RS presenta un lato ruvido caratterizzato da fibre meno compatte e una più ampia superficie di contatto disponibile. Una volta posizionata con il lato ruvido verso l'osso ricevente e l'innesto, la membrana garantisce una maggiore stabilità e un ambiente ancora più favorevole all'adesione e alla migrazione cellulare.

- Protezione dei difetti ossei peri-implantari
- Chiusura di piccole lacerazioni della membrana del seno mascellare
- Ripristino di piccole deiscenze ossee
- Protezione del sito post-estrattivo
- Copertura dell'accesso nelle procedure di rialzo del seno mascellare

- Da 4 a 6 settimane di protezione
- Atelocollagene equino di tipo I
- Totalmente sicura e biocompatibile
- Facile da applicare e da adattare al sito
- Completamente riassorbibile

Membrana di Collagene per GTR

Indicazione: Protezione dei difetti ossei perimplantari | Chiusura di piccole lacerazioni della membrana del seno | Restauro di piccole deiscenze ossee | Protezione presa post-estrattiva | Copertura dell'accesso all'osso del seno nelle procedure di rialzo del seno

Tempo di riassorbimento: **6-8 settimane**

Tempo di protezione: **4-6 settimane**

CTM-15201	15 x 20 x 0.2 mm	1 pz	€ 50,00
CTM-15206	15 x 20 x 0.2 mm	6 pz	€ 270,00
CTM-20201	20 x 20 x 0.2 mm	1 pz	€ 55,00
CTM-20206	20 x 20 x 0.2 mm	6 pz	€ 300,00
CTM-25251	25 x 25 x 0.2 mm	1 pz	€ 59,00
CTM-25256	25 x 25 x 0.2 mm	6 pz	€ 339,00
CTM-20301	20 x 30 x 0.2 mm	1 pz	€ 59,00
CTM-20306	20 x 30 x 0.2 mm	6 pz	€ 339,00
CTM-30401	30 x 40 x 0.2 mm	1 pz	€ 129,00

C-Membrane RS

Indicazione: Protezione dei difetti ossei perimplantari | Chiusura di piccole lacerazioni della membrana del seno | Restauro di piccole deiscenze ossee | Protezione presa post-estrattiva | Copertura dell'accesso all'osso del seno nelle procedure di rialzo del seno

Tempo di riassorbimento: **6-8 settimane**


Tempo di protezione: **4-6 settimane**

CTM-2020RS	20 x 20 x 0.2 mm	1 pz	€ 120,00
CTM-2525RS	25 x 25 x 0.2 mm	1 pz	€ 132,00
CTM-3040RS	30 x 40 x 0.2 mm	1 pz	€ 175,00


Disegni in scala 1:1



15 x 20 x 0.2 mm

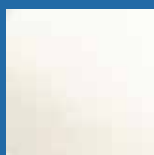

20 x 20 x 0.2 mm

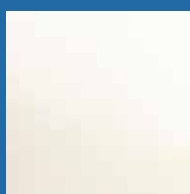

25 x 25 x 0.2 mm



20 x 30 x 0.2 mm




30 x 40 x 0.2 mm




Membrane in PTFE rinforzate

Le membrane rigenerative **Ti-PTFE** sono membrane sterili non assorbibili realizzate in polimero di politetrafluoroetilene (PTFE). Le membrane rigenerative Ti-PTFE sono rinforzate con titanio di grado medico incorporato tra due strati di PTFE. Sono materiali biologicamente inerti, apirogeni e compatibili con i tessuti.


Le membrane rigenerative in **Ti-PTFE** sono destinate alla rigenerazione ossea guidata (GBR), aiutando nella neoformazione ossea e agendo come barriere biologiche per prevenire la migrazione dall'epitelio, dal tessuto connettivo e dai batteri che potrebbero causare l'inibizione della crescita ossea, promuovendo così uno spazio adeguato per la formazione di il precursore del tessuto osseo.

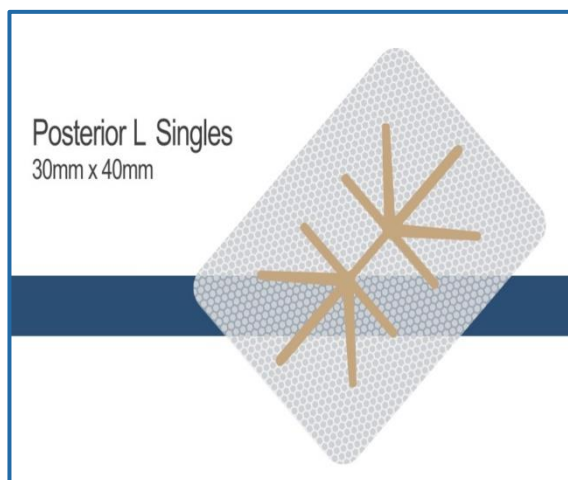


Membrana in PTFE rinforzata
€ 195.00

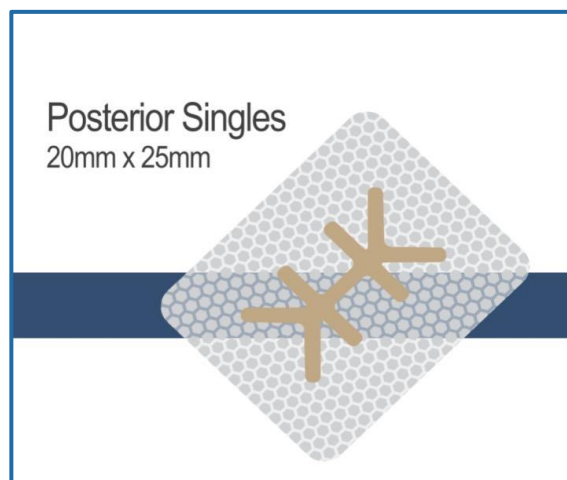

Membrana in PTFE rinforzata
€ 155.00

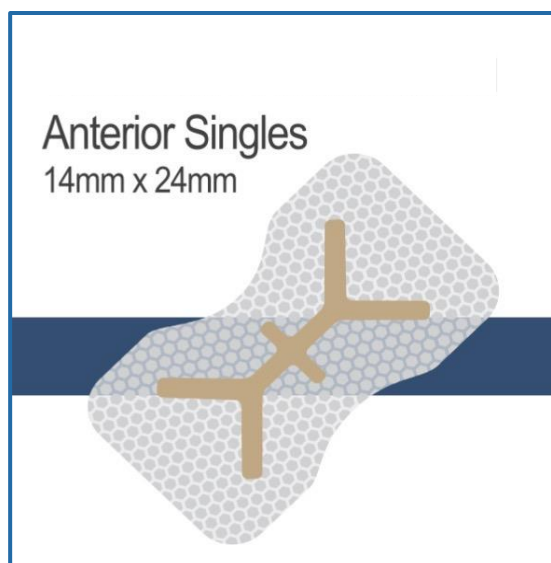

Membrana in PTFE rinforzata
€ 145.00

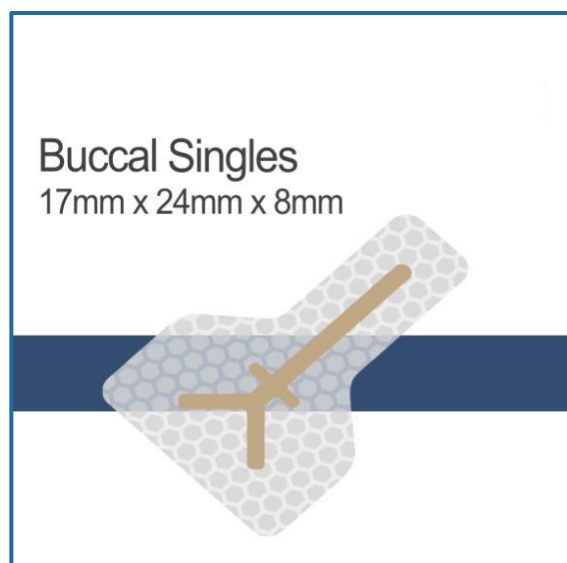

Membrana in PTFE rinforzata
€ 135.00




Il Kit **ELEVO** rappresenta la soluzione completa per il rialzo del seno crestale, progettata per garantire massima sicurezza, precisione ed efficienza in ogni fase della procedura. Grazie al controllo di profondità e agli strumenti integrati, il kit assicura risultati affidabili anche in presenza di ridotto spessore osseo.

ELEVO

CRESTAL SINUS LIFT

Vantaggi chiave del kit **ELEVO**

- Riduzione del rischio di perforazione della membrana di Schneider
- Controllo millimetrico della profondità con stop progressivi
- Sequenza chirurgica semplificata e intuitiva
- Adatto anche a operatori meno esperti
- Sicurezza e predicibilità in ogni fase dell'intervento
- Design degli strumenti pensato per un uso ergonomico e ordinato.

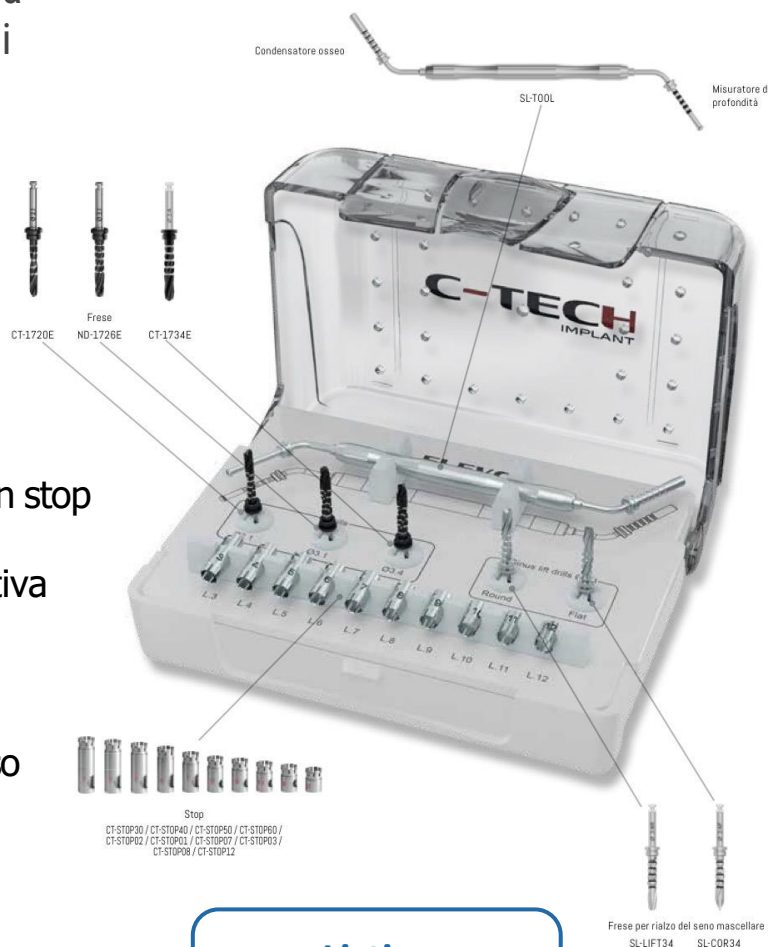

Listino
€ 990,00

Tutto il necessario, in un unico kit

ELEVO include tutti gli strumenti necessari per una corretta gestione dell'elevazione crestale. La sequenza operativa è guidata da frese con stop di profondità progressivi (da 3 a 12 mm), studiate per agire in sicurezza e garantire il controllo totale durante le fasi di preparazione del sito.



Il kit chirurgico ospita inoltre:

- Fresa lanceolata per la perforazione iniziale
- Frese Ø2.1, Ø3.1, Ø3.4 per l'ampliamento graduale
- Fresa piatta e fresa tonda per il completamento dell'osteotomia in sicurezza



ELEVO
CRESTAL SINUS LIFT

PROTOCOLLO CHIRURGICO

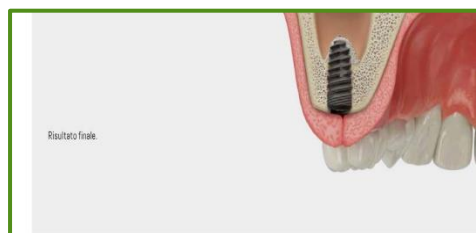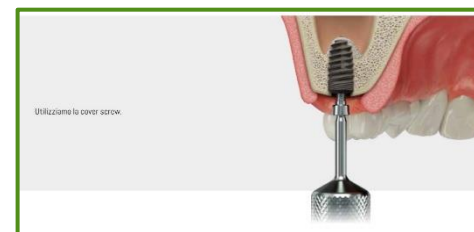



di Pravatà Ivan
Via Boves, 5
13039 – Trino (VC)

Tel. / WhatsApp : **392.6238637**

E-mail : bioclinic2020@gmail.com